

TurnTableSoft används framförallt för förflyttningar in och ut ur bilsäte men även på stolar/sängar för att underlätta vridningar. TurnTableSoft är utformad som två runda plattor med ett friktionsreducerande material på insidan som bidrar till att plattorna glider mot varandra. TurnTableSoft finns i två olika storlekar.

SystemRoMedic är en serie med olika modeller av förflyttningshjälpmedel. Valet av hjälpmedel styrs av förflyttningssituationen och brukarens funktioner och behov.



Kontroll av funktion

Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av hjälpmedlet. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.




Läs alltid manualen

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.


Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningmomentet.

Placering av TurnTableSoft

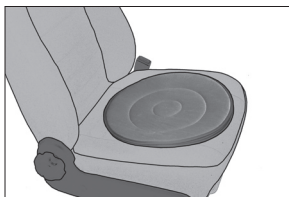

Om TurnTableSoft används på bilsätet så placeras den mitt på sätet.

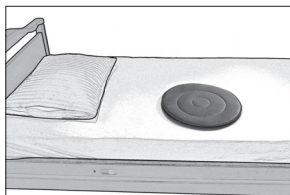


Då TurnTableSoft används på sängen placeras den på sängkanten i höjd så att brukarens huvud hamnar på kudden då han/hon lägger sig ned.

Användning av TurnTableSoft på bilsäte



Brukaren sätter sig snett på sätet med benen utanför bilen.

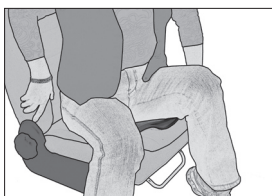

Brukaren kan nu lätt vrida runt och lyfta in benen i bilen.



Sitt kvar på TurnTableSoft under bilfärden och använd den på motsvarande sätt när brukaren ska kliva ur bilen.


Använd alltid bilbältet!

Obs! TurnTableSoft går inte att använda på skinn/galonsklädsel.


Användning av TurnTableSoft på sängen



Brukaren sätter sig ned på TurnTableSoft.

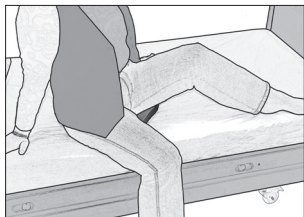

Ta stöd mot sängen, vrid runt och lyft samtidigt upp benen i sängen.

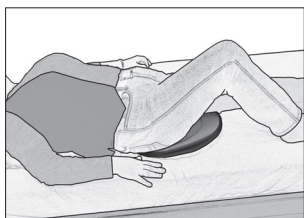

Om brukaren kan lyfta på rumpan så tas TurnTableSoft bort och förs sedan tillbaka innan uppresning.

Material:

Polyamid, polyester

Skötselråd:

Läs på märketiketten



Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för optimal livslängd av materialet.

Storlek:

5086 45 cm i diameter

5087 40 cm i diameter

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

